



WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

## GENTLE SECUREMENT TAPE



This product and its packaging are not made with natural rubber latex

Ni el producto ni su embalaje se han fabricado utilizando látex de caucho natura



Distributed by:  
CVS Pharmacy, Inc.  
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895  
CVS.com® 1-800-SHOP CVS

Master PD-508091 Rev. 01

Manufactured by:  
Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

**40438-00**  
512455 Rev. 01  
Made in Finland

### What is Mepitac®?

Mepitac is a soft silicone tape that is water resistant and can be lifted and reapplied.

It features a proprietary technology known as Safetac.



### About Safetac® Technology

Safetac is a unique adhesive technology, with the following benefits:

- Provides less pain upon removal
- Sticks gently to the skin
- Skin friendly, appropriate for sensitive skin

You can find Safetac technology in the following wound care brands: Mepilex® Border Lite, Mepilex® Lite, Mepitel® Film, Mepiform® and Mepitac®. Read more at [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com)

### What is Mepitac® for?

Mepitac gently but yet securely holds tubing, wound and surgical dressings, and it can be used for gentle protection of fragile skin.

### Precautions

Do not use if allergic or sensitive to silicone, or plastics including polyurethane, polyamide, polyester or polyethylene.

### Other information

Mepitac is a single patient use product. Never reuse!


Store in dry conditions and do not refrigerate.

Excessive sweating may cause Mepitac to not stick well.

Mepilex, Mepitel, Mepiform, Mepitac and Safetac are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.


Patent:  
US 6,479,724

### Instructions for use

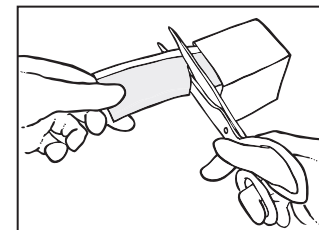

Make sure the skin is clean and dry and free from any ointment, lotion, etc, because Safetac sticks best to clean, dry skin.

Cut off the desired length of Mepitac using scissors.

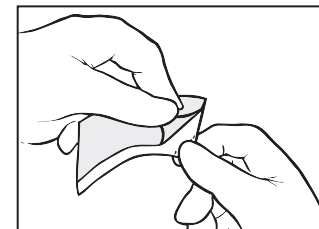

Remove the protective release film and apply Mepitac without stretching.

Mepitac can be lifted and re-applied during application.

Issued 2016-05



WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

## GENTLE SECUREMENT TAPE



This product and its packaging are not made with natural rubber latex

Ni el producto ni su embalaje se han fabricado utilizando látex de caucho natura



Distributed by:  
CVS Pharmacy, Inc.  
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895  
CVS.com® 1-800-SHOP CVS

Master PD-508091 Rev. 01

Manufactured by:  
Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

**40438-00**  
512455 Rev. 01

Made in Finland

### ¿Qué es Mepitac®?

Mepitac es una cinta de silicona suave resistente al agua que se puede levantar y volver a colocar.

Cuenta con una tecnología exclusiva conocida como Safetac.

### Acerca de la Tecnología Safetac®

Safetac es una tecnología adhesiva única que ofrece los siguientes beneficios:

- Reduce el dolor al momento de retirar
- Se adhiere suavemente a la piel
- No daña la piel, adecuado para la piel sensible.

Se puede encontrar la Tecnología Safetac en las siguientes marcas de productos para el cuidado de heridas: Mepilex® Border Lite, Mepilex® Lite, Mepitel® Film, Mepiform® y Mepitac®. Más información en [www.molnlycke.com](http://www.molnlycke.com).

### ¿Para qué se debe utilizar Mepitac®?

Mepitac está diseñado para fijar, de manera suave pero segura, los tubos, los apósitos quirúrgicos y de heridas, y se puede usar para la protección suave de la piel frágil.

es

### Precauciones

No se debe usar si es alérgico o sensible a la silicona, o a los plásticos como el poliuretano, poliamida, poliéster o polietileno.

### Otra información

Mepitac es un producto de un solo uso. ¡No reutilizar!


Almacene en un lugar seco y no se debe refrigerar.

El sudor excesivo puede provocar que Mepitac no se adhiera bien.


Mepilex, Mepitel, Mepiform, Mepitac y Safetac son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB.

Patent:  
US 6,479,724

### Instrucciones de uso

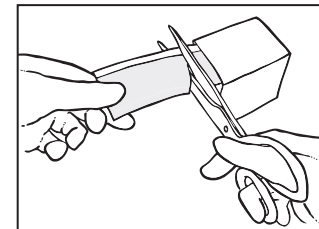

Asegúrese de limpiar y secar la piel, libre de ungüentos, lociones, etc., debido a que Safetac se adhiere mejor a la piel limpia y seca. Corte el largo deseado de Mepitac con tijeras.

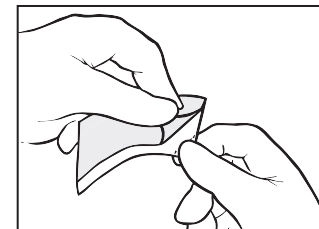

Retire la película protectora y coloque Mepitac sin estirar. Mepitac se puede levantar y volver a colocar durante la aplicación.

Publicado en 2016-05