




by Biogel®

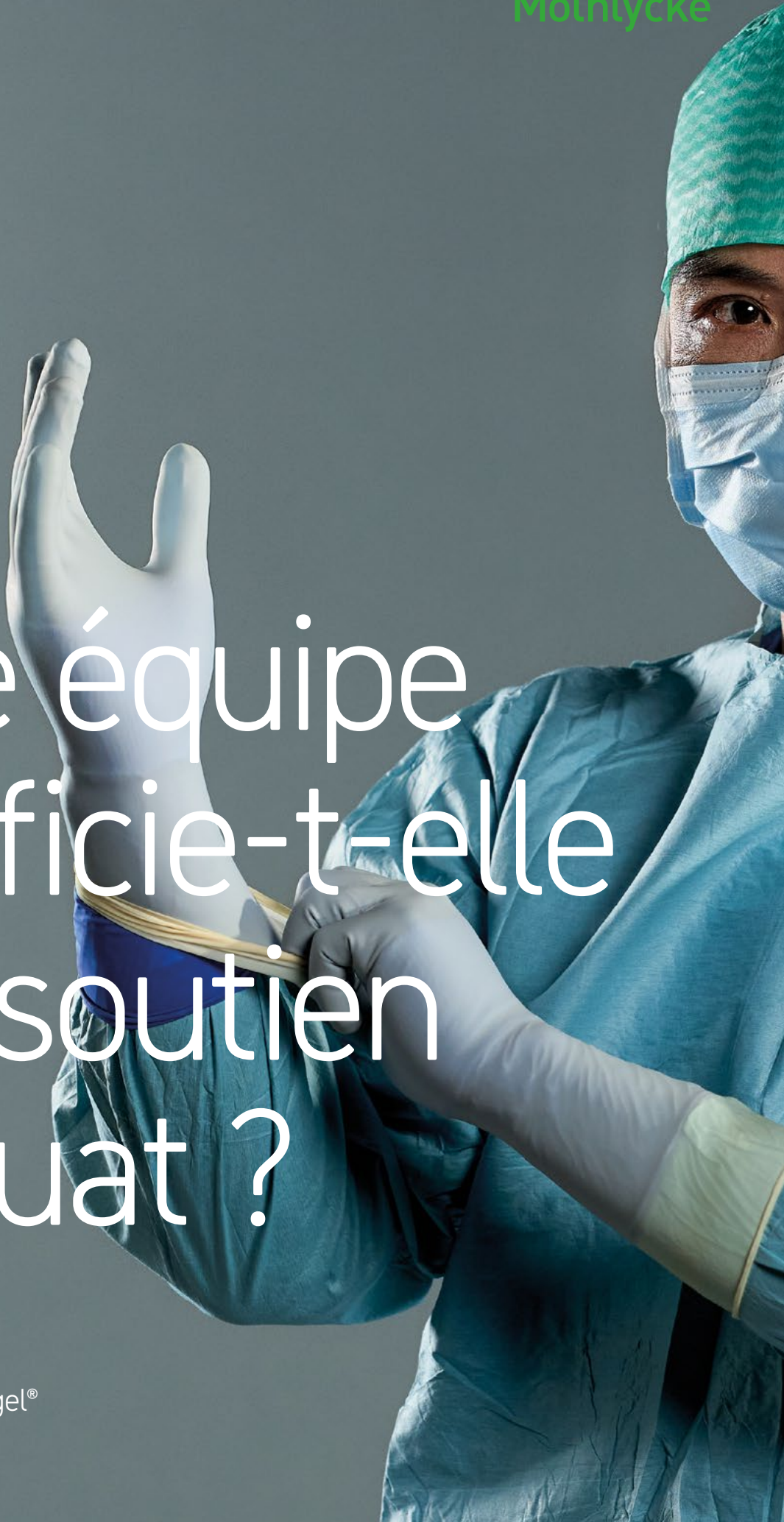


Votre équipe
bénéficie-t-elle
d'un soutien
adéquat ?

Découvrez MyFit™ by Biogel®
Fit for progress

Pourquoi l'ajustement est-il important ?

L'ajustement est le facteur numéro un lors du choix des gants chirurgicaux¹, pourtant l'inconfort reste fréquent². Cela peut sembler une question de préférence personnelle, mais l'ajustement des gants affecte en réalité la sécurité, la santé et la performance au bloc opératoire⁴.

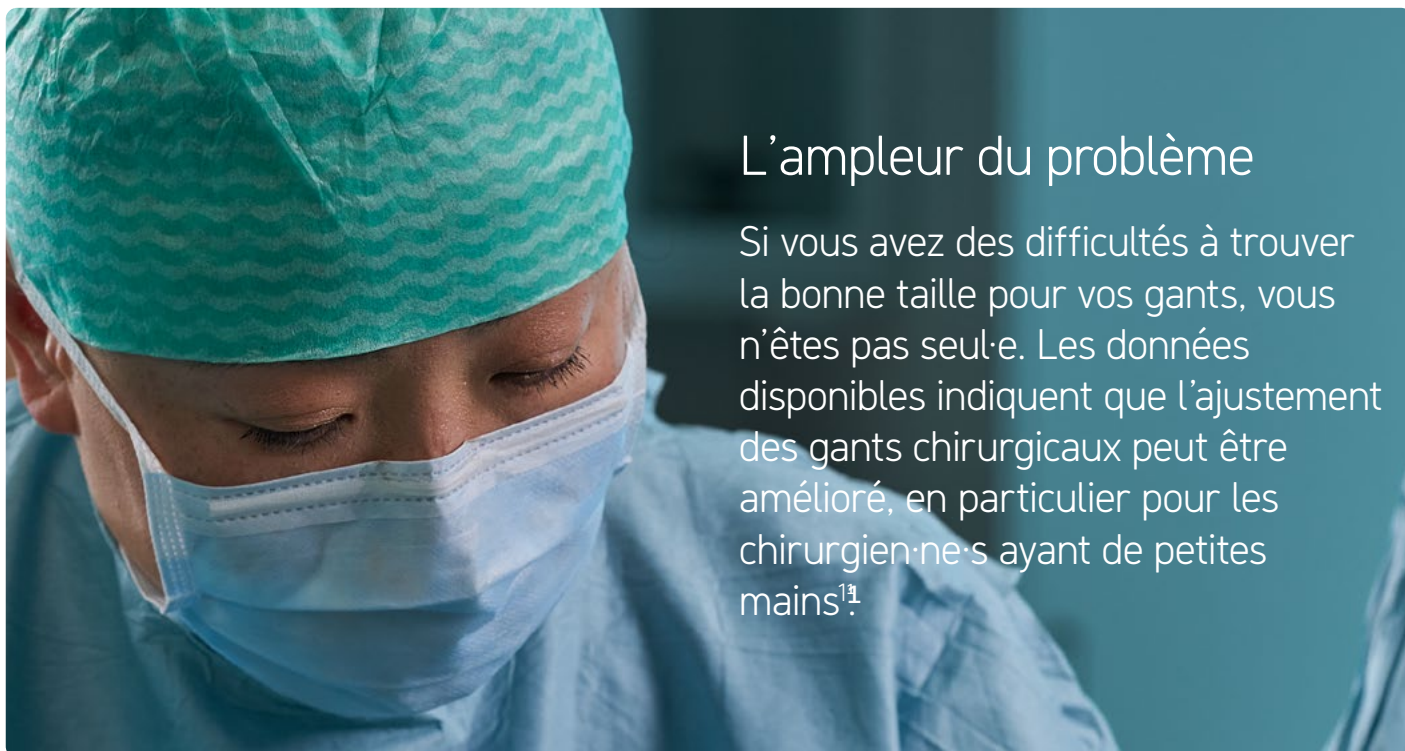

L'ampleur du problème

Si vous avez des difficultés à trouver la bonne taille pour vos gants, vous n'êtes pas seul·e. Les données disponibles indiquent que l'ajustement des gants chirurgicaux peut être amélioré, en particulier pour les chirurgien·ne·s ayant de petites mains¹.

1 chirurgien·ne sur 3

ayant de petites mains souhaite des tailles de gants plus adaptées ou personnalisées¹.

44%

des femmes déclarent que leur taille de gants actuelle ne leur convient pas³.

A portrait of Dr. Daisy Schulten, a woman with long, wavy blonde hair, wearing a dark turtleneck and a patterned jacket. She is smiling slightly and looking towards the camera. The background is a blurred blue and white.

« Les gants sont essentiels dans mon travail. Lorsqu'ils ne sont pas à la bonne taille, il faut sans cesse les réajuster. Cela devient inconfortable, et la procédure prend plus de temps. »

Dr Daisy Schulten
Chirurgienne pédiatrique, Allemagne

Un meilleur ajustement n'est pas un « luxe »

Un bon ajustement des gants n'est pas juste une question de confort. C'est essentiel pour la sécurité et la performance au bloc opératoire^{4,1}. Avec le temps, même de petits compromis peuvent affecter les performances individuelles, l'efficacité de l'équipe et, en fin de compte, les résultats pour les patient·e·s⁴.

Risque accru pour la sécurité :



Les taux de perforation des gants peuvent augmenter d'environ **75 %** ou plus lorsque les gants sont trop serrés ou trop lâches⁵.

Conséquences sur les performances :



Porter une taille de gants incorrecte peut augmenter le temps de travail de **6 %**¹.



Un ajustement inadéquat des gants peut **réduire** la sensibilité tactile^{6,1}.



Un mauvais ajustement des gants entraîne une diminution subjective des performances et de la satisfaction chez **50 %** des femmes³.

Conséquences accrues sur la santé :



Par rapport aux chirurgiens masculins, les chirurgiennes étaient 3.5 fois plus susceptibles de recevoir un traitement pour leurs mains, y compris le poignet, le pouce et les doigts².

Parce que chaque main mérite un ajustement parfait


Une équipe ne peut exprimer pleinement son potentiel que lorsque les outils de travail sont adaptés aux personnes qui les utilisent. En mettant l'accent sur un ajustement individuel des gants, il est possible de favoriser le confort, la performance et le bien-être au bloc opératoire, tout en contribuant à un environnement de travail plus inclusif pour l'ensemble de l'équipe chirurgicale.

Une opportunité d'améliorer la sécurité et la performance


Un ajustement optimal des gants favorise le bien-être, la sécurité et la performance de l'ensemble de l'équipe chirurgicale. En réduisant la fatigue des mains, en optimisant la sensibilité tactile et en diminuant le risque de perforation, il contribue à une pratique plus sûre, plus confortable et plus efficace au bloc opératoire.

Recommandations consensuelles sur l'ajustement des gants⁷


L'importance de l'ajustement des gants va au-delà de la simple préférence individuelle. Un panel mondial de consensus clinique recommande une approche structurée de l'ajustement des gants en milieu chirurgical :

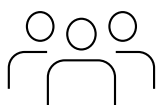


Tous les membres de l'équipe chirurgicale doivent se soumettre à un **ajustement des gants** avant de se préparer pour entrer dans le bloc opératoire pour la première fois.

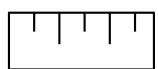

Un **ajustement supplémentaire des gants** doit être effectué en cas de changement de fabricant et/ou lorsque des éléments de confort ou de performance sont impactés.

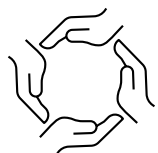

Des gants de **tailles et de modèles variables**, offrant un ajustement adapté à chacun, devraient être mis à la disposition de tous les membres de l'équipe chirurgicale, quels que soient leur sexe ou leur origine ethnique.

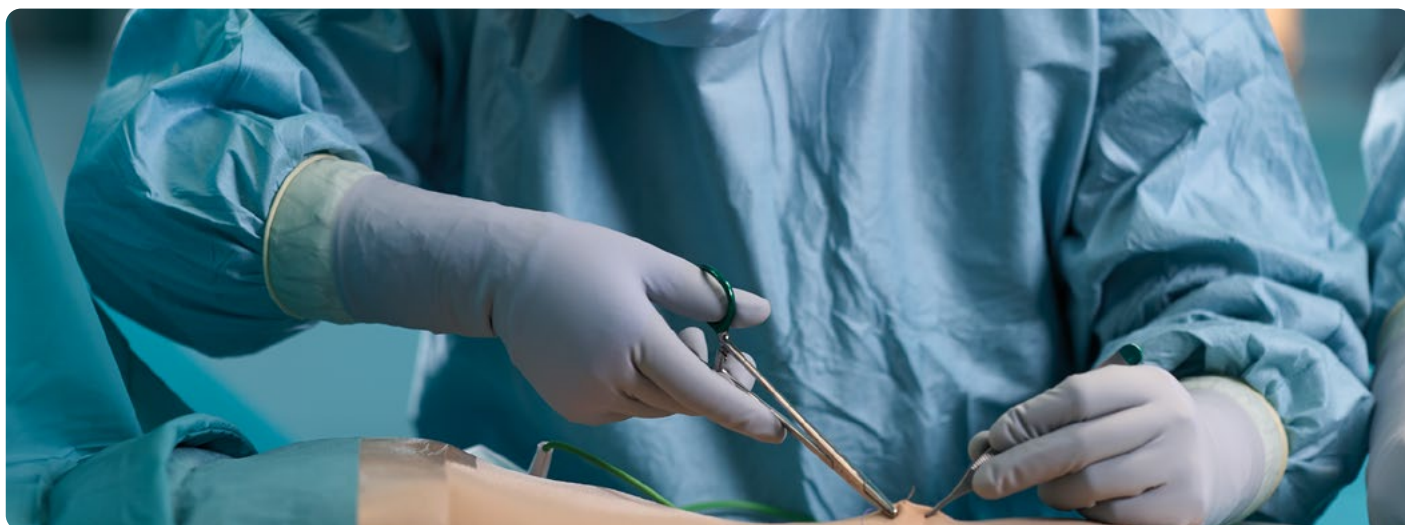



Les temps ont changé. Les tailles de gants n'ont pas changé.

Les gants chirurgicaux ont été conçus à une époque où le métier de chirurgien était majoritairement exercé par des hommes, et sont donc généralement optimisés pour des proportions de mains plus grandes.

Les équipes chirurgicales d'aujourd'hui sont plus diversifiées que jamais, pourtant la taille des gants a très peu évolué. La plupart des gants chirurgicaux stériles sont encore dimensionnés en fonction de la largeur de la paume, sans tenir compte des dimensions des doigts.

« Concevoir des gants chirurgicaux uniquement sur la base des dimensions des mains masculines n'a pas de sens, alors qu'environ 50 % des chirurgiens sont des femmes. »

Dr Sanna Kouhia
Chirurgienne, Finlande

Le premier gant jamais conçu selon de véritables dimensions tridimensionnelles de la main^{8,14}

Basé sur plus de 50 000 points de données, MyFit™ est conçu pour prendre en compte la variation réelle des dimensions de la main et aider davantage d'utilisateur·rice·s à trouver une taille de gants appropriée⁸.

MyFit™ ne consiste pas à ajouter un autre produit pour le simple plaisir d'en avoir un. Il s'agit d'un investissement à long terme dans le bien-être du personnel chirurgical, les performances chirurgicales et l'inclusivité. Parce que chaque utilisateur·ice mérite des gants chirurgicaux qui garantissent performances, sécurité et confort tout au long d'une intervention. MyFit™ peut contribuer à rendre cela possible.

MyFit™ permet à davantage d'utilisateur·rice·s d'obtenir un meilleur ajustement à la fois de la paume et des doigts, sans compromis⁸.

60 % des utilisateur·rice·s portant des tailles 6.0-7.0 ont choisi MyFit™ plutôt que des gants standards⁹.

Envisagez MyFit™ si vous observez, chez vous-même ou au sein de l'équipe chirurgicale, des signes indiquant que l'ajustement des gants n'est pas optimal, par exemple :

Les doigts semblent trop longs ou trop lâches.

Les gants semblent serrés au niveau de la paume.

Vous avez recours à une taille de gant plus grande ou plus petite afin de compenser des problèmes liés à l'ajustement.

Les gants doivent être réajustés à plusieurs reprises pendant l'intervention.

Vous ressentez des crampes, de la fatigue ou une sensibilité réduite

Plus d'options de tailles pour un ajustement parfait de votre équipe⁴



Si la paume convient et les doigts sont lâches

MyFit™
6.0



Si la paume est serrée et les doigts sont bien ajustés

Taille actuelle
0.6



MyFit™
6.5



MyFit™ convient-il à votre équipe ?

Tailles classiques	MyFit™ Overglove	MyFit™ Indicator® Underglove	MyFit™ Indicator® System
5.5			
6	6	6	6
6.5	6.5	6.5	6.5
7	7	7	7
7.5		7.5	
8			
8.5			
9			

Voici en quoi MyFit™ by Biogel® diffère des tailles classiques :

Doigts plus courts

Doigts plus fins

Circonférence de poignet plus petite





Testez la taille de gants de vos équipes

Découvrez si vous pourriez bénéficier de MyFit™ :

www.molnlycke.com/fr-ch/de/Biogel-handschuhe/Biogel-HandScan

Contactez votre représentant Biogel® pour organiser une séance de numérisation des mains.

Références:

1. Dziak K, Otterhed K, Vigmo J. Fit for all! Surgical glove fit is critical to performance and needs improvement. Presented at AORN Surgical Conference & Expo; 2026 Apr 11-14; New Orleans, LA, USA.
2. Sutton E, Irvin M, Zeigler C, Lee G, Park A. The ergonomics of women in surgery. Vol. 28, Surgical Endoscopy. Springer; 2014. p. 1051-5.
3. Majeed H, Moss E, Majeed H, Byun JH, Altin E, Yanagawa B. Surgical gloves need a better fit: Promoting equity in operating rooms. Vol. 27, JTCVS Open. Elsevier, Inc; 2025. p. 223-30.
4. Chatterjee A, Spratt DL, Enz A, Bah-Rösman J, Brindle CT. Hands Deserve Better: A Systematic Review on Surgical Glove Fit and Provider Performance. Vol. 14, Journal of Clinical Medicine. MDPI AG; 2025.
5. Zare A, Choobineh A, Jahangiri M, Seif M, Dehghani F. Does Size Affect the Rate of Perforation? A Cross-sectional Study of Medical Gloves. Vol. 65, Annals of work exposures and health. Oxford University Press; 2021. p. 854-61.
6. Drabek T, Boucek CD, Buffington CW. Wearing the Wrong Size Latex Surgical Gloves Impairs Manual Dexterity. Vol. 7, Journal of Occupational and Environmental Hygiene. Taylor & Francis; 2010. p. 152-5.
7. Enz A, Boormeester MA, Chatterjee A, Coombs N, Dye L, Johnson P, et al. (in press) Hands Deserve Better: Global Clinical Consensus Recommendations on Surgical Gloving Practice. Journal of Hospital Infection. W.B. Saunders; 2026.
8. Anthropometric Study Summary – Hand Dimensions Supporting Surgical Glove Sizing. Mölnlycke Health Care 2026. Data on file.
9. User Acceptance Testing. Mölnlycke Health Care 2026. Data on file.

Biogel®





Demandez **MyFit™** by Biogel®

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.molnlycke.com/fr-ch/

Mölnlycke Health Care AG, Brandstr. 24, 8952 Schlieren, Suisse.
T +41 44 744 54 00 F +41 44 744 54 11 www.molnlycke.com/fr-ch/
Les marques Mölnlycke, Biogel, Indicator et MyFit, ainsi que les noms et logos correspondants, sont des marques déposées à l'échelle mondiale appartenant au groupe Mölnlycke Health Care.
©2026 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés. CHAFRIM009212
<https://www.molnlycke.com/fr-ch/privacy-centre/>

